

High-Flow Nasal-Interface **Airgap™**



NEU






Knickfrei und
weiche Oberfläche

Freies Septum

Verstellbare
Schlauchfixierung


Hautschonendes Ablösen des
Interfaces und der Klebepads

High-Flow Nasal-Interface **Airgap™**

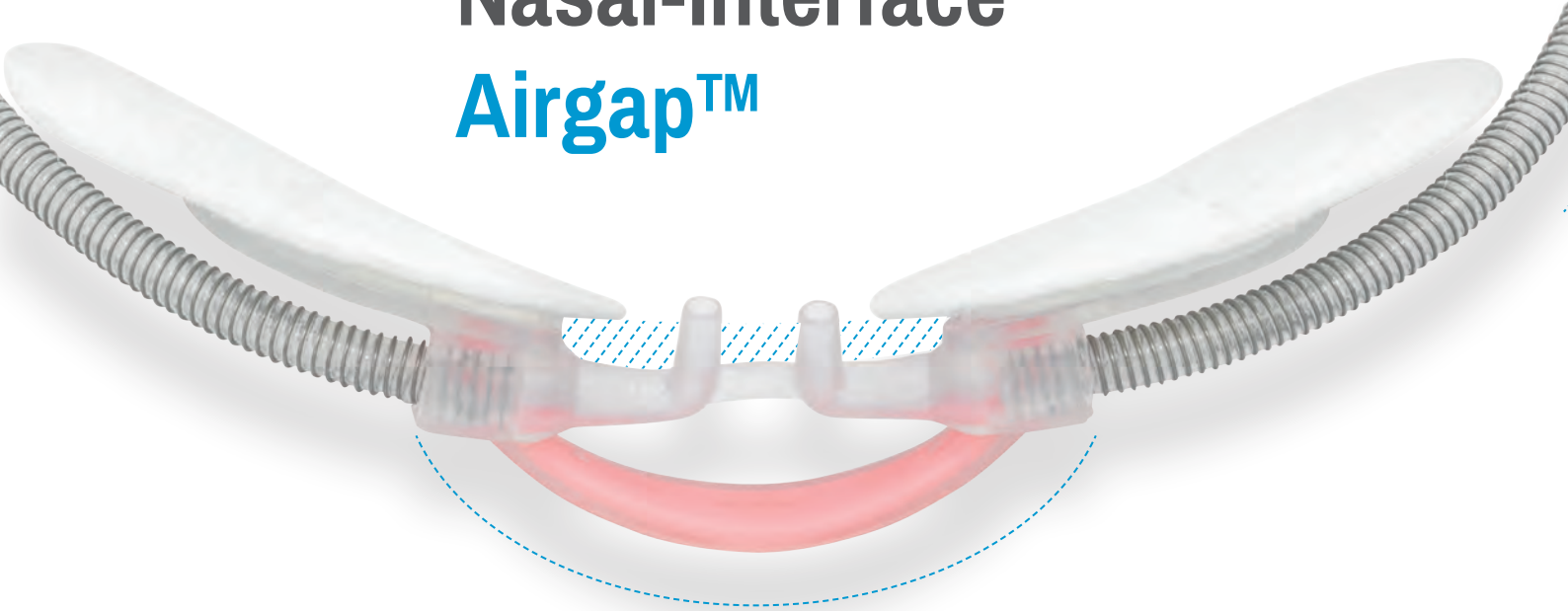

Septum frei – gleichmäßige Druckverteilung durch den Steg

Der durch den Steg entstehende Luftspalt führt zu einem reduzierten Hautkontakt und einer stabileren Position der Prongs. Von außen auf den Steg zugeführter Druck wird nicht auf die Prongs übertragen. Druckstellen am Septum und Philtrum werden somit verhindert.

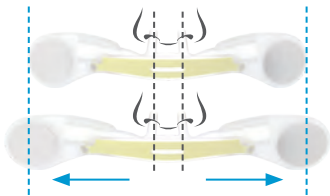


Das Interface wird mit einem Klettverschluss an die – auf der Haut befindlichen – Klebepads fixiert und kann abgenommen werden ohne die Klebepads selbst entfernen zu müssen. Zu einem späteren Zeitpunkt ist eine einfache Anbringung wieder möglich.


Knickfrei und weiche Oberfläche

Silikonschlauch


Der Schlauch aus Silikon ist knickfrei und elastisch, dadurch sitzt das Interface auch bei Zug an den Schläuchen stabil. Der Schlauch hat eine weiche Oberfläche und ist hautfreundlich.

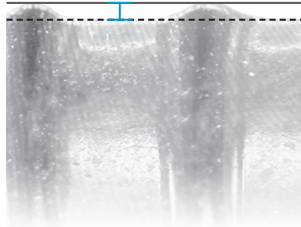

Airgap™

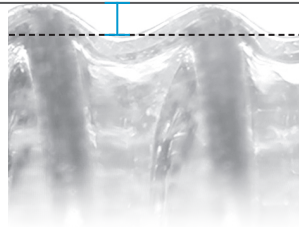

Vergleich – XL

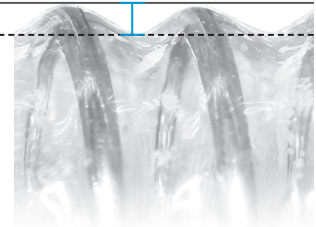

Vergleich – XS

Schmerzfreies und hautschonendes Ablösen

Klebepads auf Silikonbasis

Die atmungsaktiven Pads sind besonders für empfindliche Haut geeignet und reduzieren allergische Reaktionen. Sie lassen sich wiederholt repositionieren und verlängern dadurch die mögliche Nutzungsdauer. Das einfache und schmerzlose Entfernen minimiert Stress und Unbehagen des kleinen Patienten.

Schmerzlos

Atmungsaktiv



Sicherheit und Komfort

Mützen zur Fixierung und Vermeidung von Druckstellen

Um den Kontakt zwischen Schlauch und Haut zu verhindern, kann die Airgap™ Mütze verwendet werden. An dieser kann der Schlauch mit den inbegriffenen Schlauchfixierungen einfach und sicher befestigt werden.






High-Flow Nasal-Interface Airgap™

Artikelnummer	Größe	Farbe		Körpergewicht	Flowrate	VE
FMMD2046	XS	Blau		Ca. 1 - 2 kg	0,5 - 8 l/min	10 Stk./Box
FMMD2047	S	Rosa		Ca. 1 - 3,5 kg	0,5 - 9 l/min	10 Stk./Box
TKMD2001	M	Gelb		Ca. 1,5 - 8 kg	0,5 - 10 l/min	10 Stk./Box
TKMD2002	L	Lila		Ca. 3,5 - 18 kg	0,5 - 23 l/min	10 Stk./Box
TKMD2003	XL	Grün		Ca. 7 - 25 kg	0,5 - 25 l/min	10 Stk./Box

Adapter für alle gängigen Systeme sind im Lieferumfang enthalten.

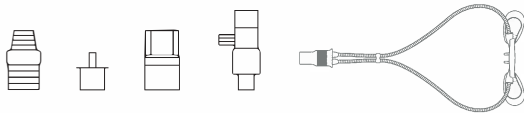

Silikon-Klebepads

Artikelnummer	Größe		VE
FMMJ3006	XS/S		20 Stk./Box
FMMJ3005	M/L/XL		20 Stk./Box



Mützen

Artikelnummer	Größe	VE
FMMD2068	XS	10 Stk./Box
FMMD2069	S	10 Stk./Box
FMMD2070	M	10 Stk./Box
FMMD2071	L/XL	10 Stk./Box



Mütze mit Schlauchfixierung

